

tobii
dynavox

TD Snap Neuerungen 24/25

Sven Pfeil
/ Trainer, Logopäde




08. - 09. Juli 2025
Johannes Kepler Universität Linz



Regelmäßige TD Snap Updates


- Mit neuen Funktionen
- Neuen PCS Symbolen
- Verbesserungen
-

[Aktuelle Release Notes](#)

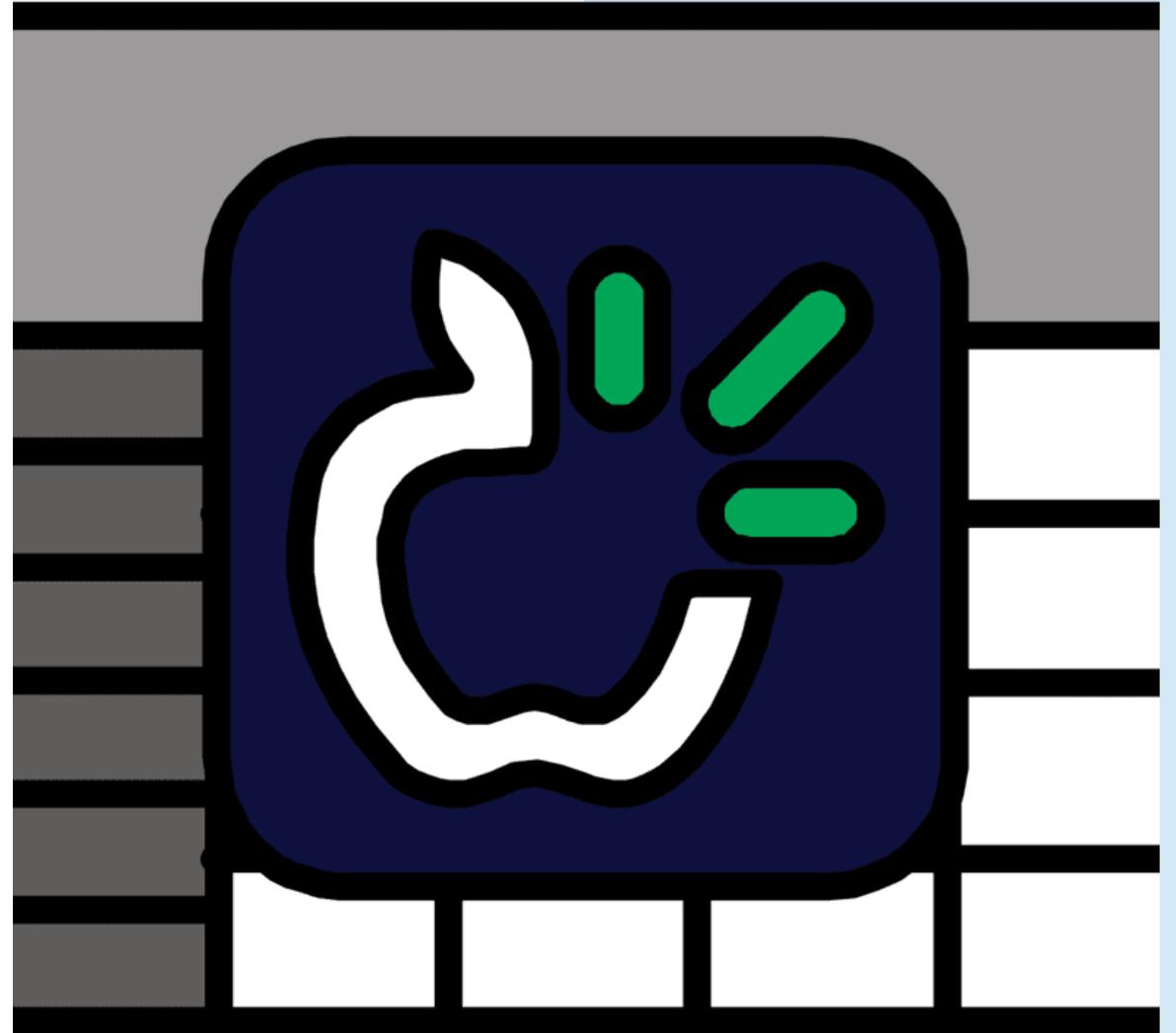



Was ist TD Snap??

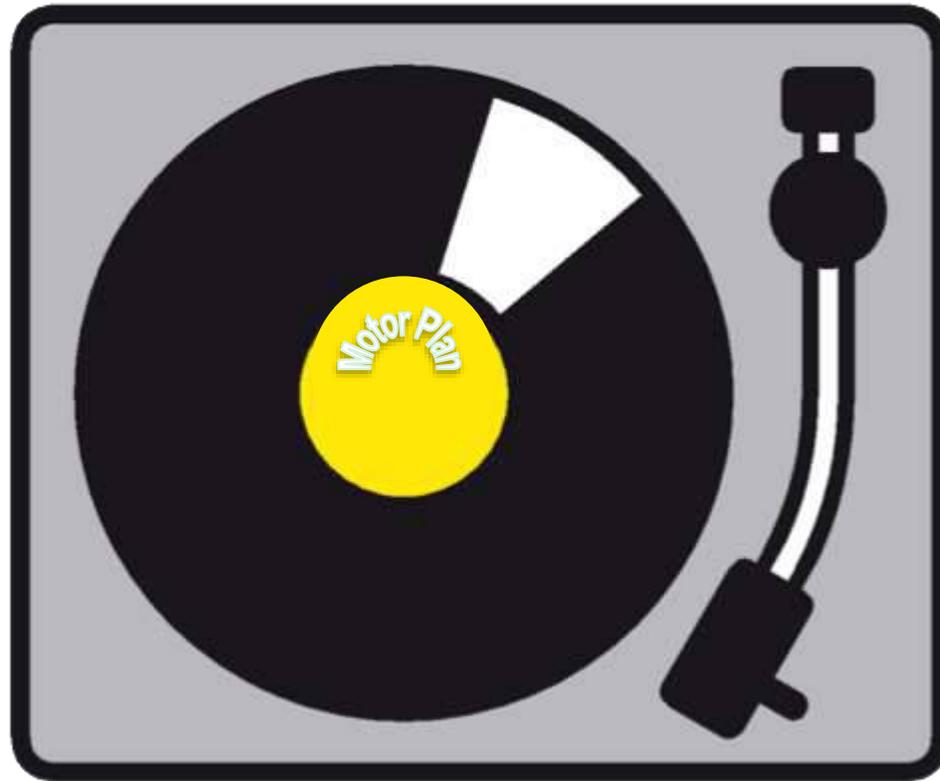


TD Snap



Vokabulare/
Seitensets



Welche Vorteile
bietet die Nutzung
derselben
Plattform??

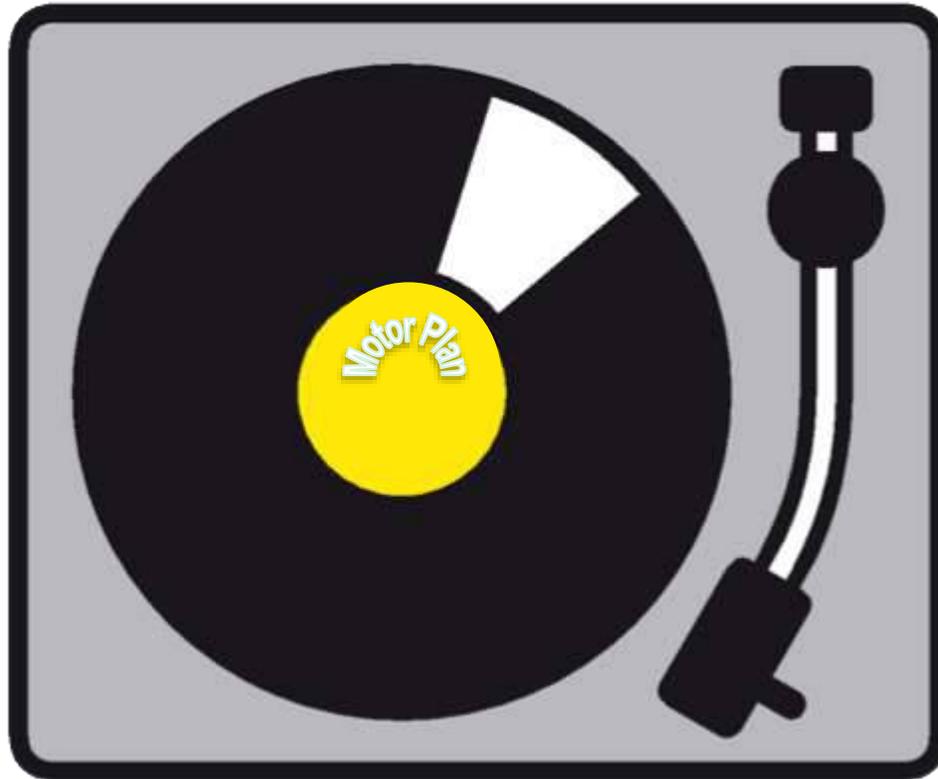

Für Eltern/Lehrer/Therapeuten/Betreuer:

- Lernen, Lehren und Unterstützen mit einer Software.
- Machen Sie sich mit einer Software und ihren Funktionen vertraut, was wiederum eine umfassendere Nutzung ermöglicht.
- Vertrautheit mit den Bearbeitungswerkzeugen, was die Personalisierung fördert.
- Die Möglichkeit, das richtige Gerät bereitzustellen, um die individuellen Bedürfnisse zu erfüllen, bei einer Vielzahl an verschiedenen Geräten.
- Teilen Sie Funktionen über verschiedene Vokabulare hinweg
 - Whiteboard
 - Fotoalben etc
- Einfacher Austausch von benutzerdefinierten Inhalten zwischen Nutzern, z. B.:
 - Vokabular des Lehrplans
 - Events, wie z.B. Olympia
 - Feiertage etc.



TD Snap
Seitensets –
Deutsch



Core First



Aphasie



Text



Motor Plan



Express



Verfügbarkeit von Sprachen



Core First

Arabisch
Chinesisch
Tschechisch
Dänisch
Holländisch
Englisch US
Englisch UK
Englisch CA
Deutsch AU
Finnisch
Französisch
Französisch CA
Deutsch
Deutsch
(Schweiz)
Hebräisch
Isländisch
Italienisch
Japanisch
Norwegisch
Portugiesisch
(BR)
Spanisch (MX)
Spanisch
Schwedisch
Türkisch



Aphasie

Englisch US
Englisch UK
Englisch CA
Englisch AU

Deutsch



Text


Dänisch
Holländisch
Englisch US
Englisch UK
Englisch CA
Englisch
AU

Deutsch

Norwegisch

Spanisch (MX)

Schwedisch

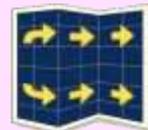

Motor Plan

Englisch US
Englisch UK

Englisch AU

Deutsch

Spanisch (MX)
Spanisch



Express

Arabisch

Dänisch

Englisch US
Englisch UK
Englisch CA
Englisch

Französisch

Deutsch

Italienisch

Spanisch
Schwedisch

Slowenisch
(PSC)
Polnisch



Hauptmerkmale

	 Core First Seitenset	 Aphasie Seitenset	 Text Seitenset	 Motor Plan Seitenset	 Express Seitenset
Symbolbasiert	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
PCS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Metacom	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Widgit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Textbasiert	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Visuelle Szenen	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
Leere Vorlagen verfügbar	Ja		Ja	Nein	Ja
QWERTZ Tastatur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ABC Tastatur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Raster Tastatur	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Whiteboard	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verhaltensunterstützung	Ja		Nein	Ja	Ja
Bücher und Fotos	Ja, Import	Ja	Nein	Ja	Ja
Starten externer Anwendungen	Ja		Ja	Ja	Nein
Google Assistant	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Kernvokabular	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Randvokabular	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Vorgespeicherte Nachrichten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zugängliche Geräteeinstellungen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zugängliche Auswahleinstellung	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Intelligente Assistenten	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Desktopkontrolle	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja

Hardware Optionen



TD I-110



TD I-13 und I-16



TD Navio Mini, Midi & Maxi



TD Pilot

Begleitlizenz & TD Care

Zu jedem TD Gerät gibt es eine TD Snap Begleitlizenz mit 2 Aktivierungen für eigene Geräte.

Ebenso hat jedes TD Gerät 5 Jahre TD Care Schutz.

[TD Care: Was ist enthalten](#)

Februar 2024

Update auf Version 1.31



TD Snap 1.31

- Tausende neue Kontrastreiche PCS Symbole







TD Snap 1.31


- Verbesserte Symbolsuche
- Neu: Websuche

The screenshot displays two search windows. The top window, titled 'Symbolsuche', shows search results for the word 'sprechen'. It features a search bar with the text 'sprechen', a filter menu with 'Symbol' selected, and a grid of 354 results. Each result consists of a small icon of people talking and the word 'sprechen' written below it. The bottom window, also titled 'Symbolsuche', shows search results for 'Rewe-Flag Herleburg'. It has a search bar with the text 'Rewe-Flag Herleburg', a filter menu with 'Web' selected, and a grid of 100 results. These results include various images of Rewe stores, product packaging like 'Arndorfer' ice cream, and other related content. Three red boxes highlight specific elements: the search bar of the bottom window, the 'Web' filter button, and a small text box at the bottom left that reads 'Ergebnisse aus Microsoft Bing My search: Rewe-Flag Herleburg'.

TD Snap 1.31


- Wortvorhersage zurücksetzen

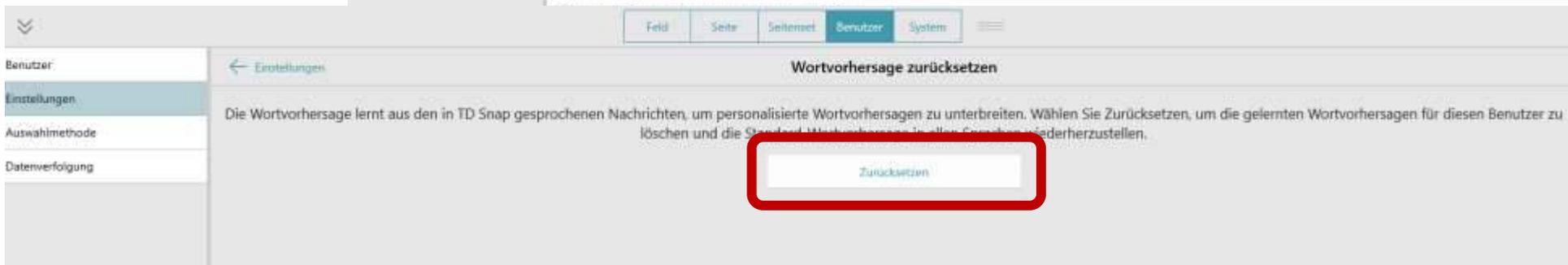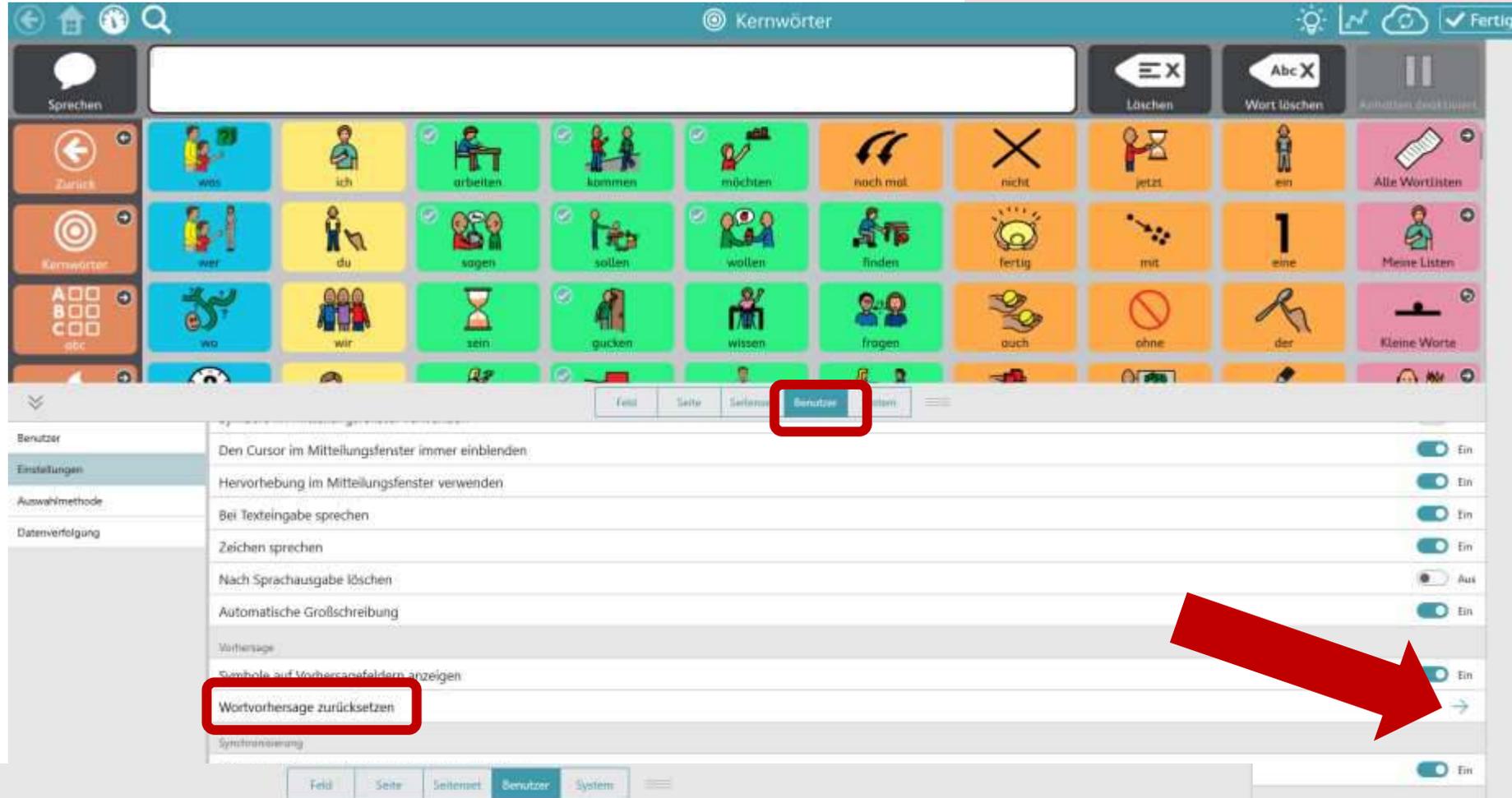

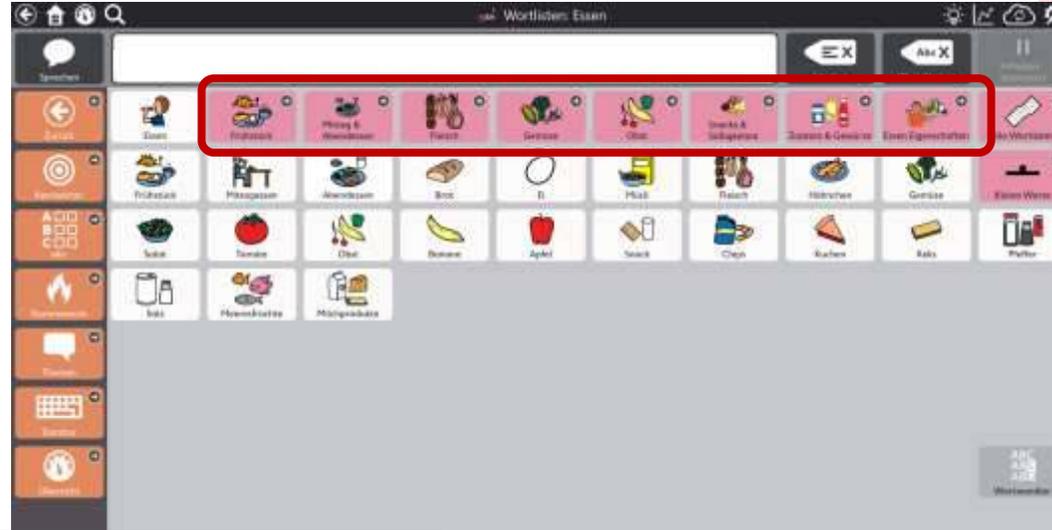

TD Snap 1.31

- Angepasste Wortlisten und Themen in Core First PCS & Metacom

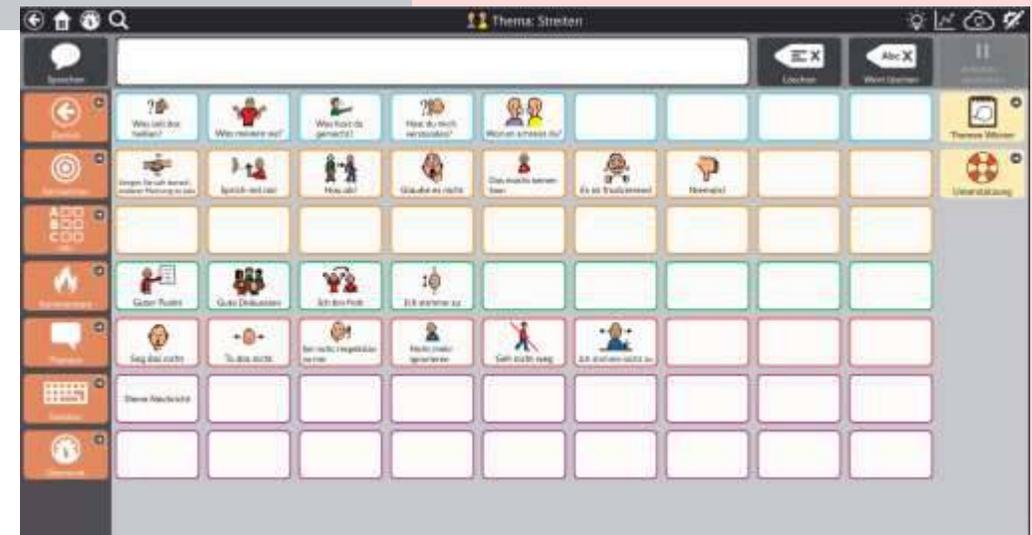



TD Snap 1.31

- TD Snap Express Deutsch



<https://www.mytobiidynamox.com/psc/snapcorefirst/482139>

Mai 2024

Update auf Version 1.32

TD Snap 1.32

- Eigene Lautstärke für Sprachausgabe und Feedback

The screenshot displays the 'Hauptseite' (Main page) of the software, featuring several application tiles: 'Core First PCS', 'Core First METACOM', 'Express', 'Voice Smileys', and a grid icon. Below the tiles is a navigation bar with 'Feld', 'Seite', 'Sitzraum', 'Benutzer', and 'System' tabs. The 'Benutzer' tab is active, showing a settings menu with the following items:


- Benutzer
- Einstellungen
- Auswahlmethode
- Datenverfolgung

The 'Audiofeedback' settings are expanded, showing the following options:

- Auswahlmethode
- Audiofeedback verwenden Ein
- Feedbackstimme: Andreas
- Geschwindigkeit Stimme: 10
- Stimmhöhe: 10
- Feedback-Lautstärke: 100** (highlighted with a red box)
- Feedback mit Sprachausgabe mischen Aus
- Sprachausnahmen
- Ausgabegerät für Audio-Feedback: Standard
- Sprachspezifische Feedback-Stimmen

TD Snap 1.32

- Express Seitenset in TD Snap integriert

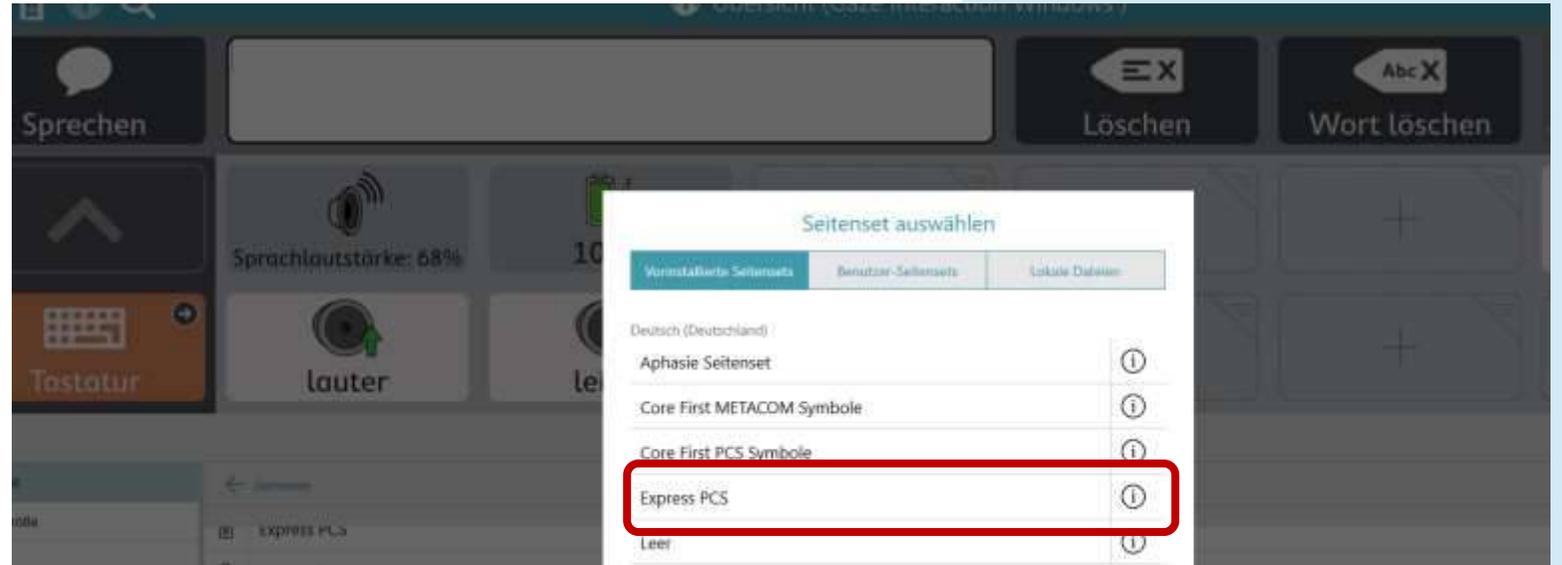



Deezer



emoji



Android



Apple



GitHub



Bitcoin



basketball 3x3



judo


TD Snap 1.32
- und natürlich neue PCS Symbole

Juli 2024

- Update auf Version 1.33

TD Snap 1.33

- Linienstärke in Whiteboard

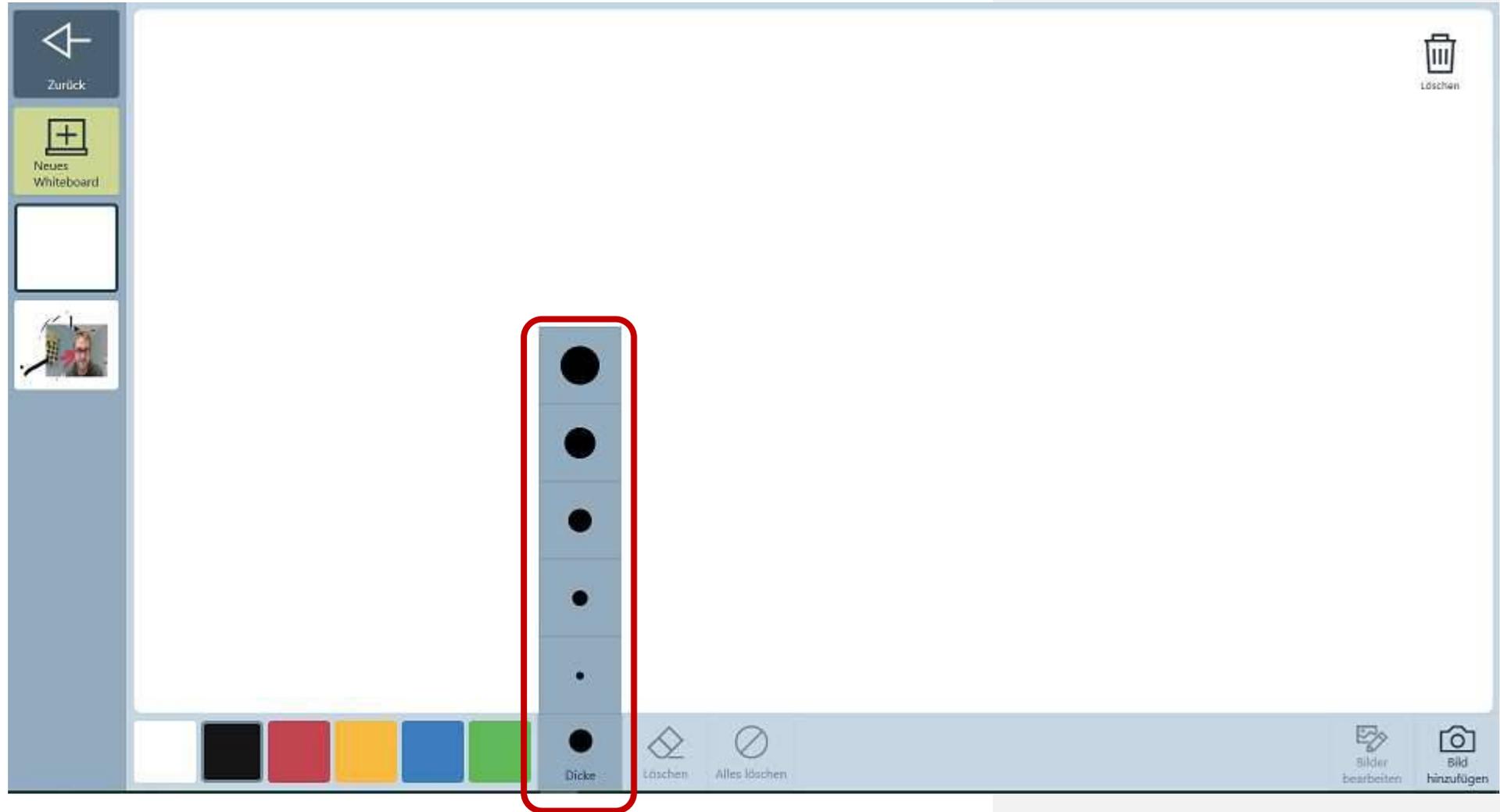




baklava



Aktivitätsbox



Bewältigungsstrategie

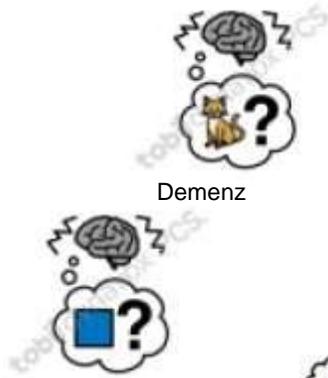


Demenz



Bulimie



ADHS

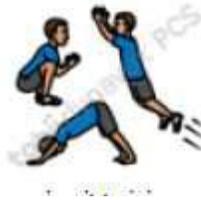

Zirkeltraining

TD Snap 1.33
- und natürlich neue PCS Symbole

Juli 2024

- Boardmaker 7 Update auf Version 7.2.6

43.000 neue PCS
Symbole
hinzugefügt um
Einheitlichkeit
zwischen TD Snap
und BM 7 zu haben

Zusätzliche Kinder- und Teenagerstimmen

Benutzer

Stimme

Zusätzliche Stimmen

← Benutzer

Installiert

			Lea Deutsch (Deutschland), Weiblich, Kind, Acapela	
			Mathilda Deutsch (Deutschland), Weiblich, Kind, Acapela	
			Leonie Deutsch (Deutschland), Weiblich, Teenager, Acapela	
			Nele Deutsch (Deutschland), Weiblich, Teenager, Acapela	
			Claudia Deutsch (Deutschland), Weiblich, Erwachsener, Acapela	
			ClaudiaSmile Deutsch (Deutschland), Weiblich, Erwachsener, Acapela	
			Julia Deutsch (Deutschland), Weiblich, Erwachsener, Acapela	
			Sarah Deutsch (Deutschland), Weiblich, Erwachsener, Acapela	
			Jonas Deutsch (Deutschland), Männlich, Kind, Acapela	
			Finn Deutsch (Deutschland), Männlich, Teenager, Acapela	
			Andreas Deutsch (Deutschland), Männlich, Erwachsener, Acapela	
			Klaus Deutsch (Deutschland), Männlich, Erwachsener, Acapela	


Oktober 2024

- Update auf Version 1.34

TD Snap 1.34
- Neuer Symbol Editor



TD Snap 1.34
- Motor Plan Deutsch

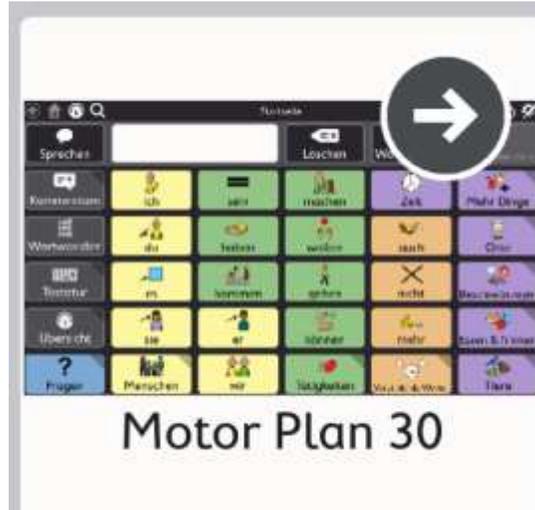




Gewichtsweste



Sensorisches Spielzeug

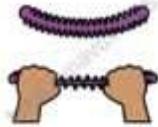

Elastisches Spielzeug



Bällebad



Glühwein

TD Snap 1.34
- und natürlich neue PCS Symbole



Stabhochsprung




Ersatzverhalten

Dezember 2024

- Update auf Version 1.35

TD Snap 1.35
- YouTube Player

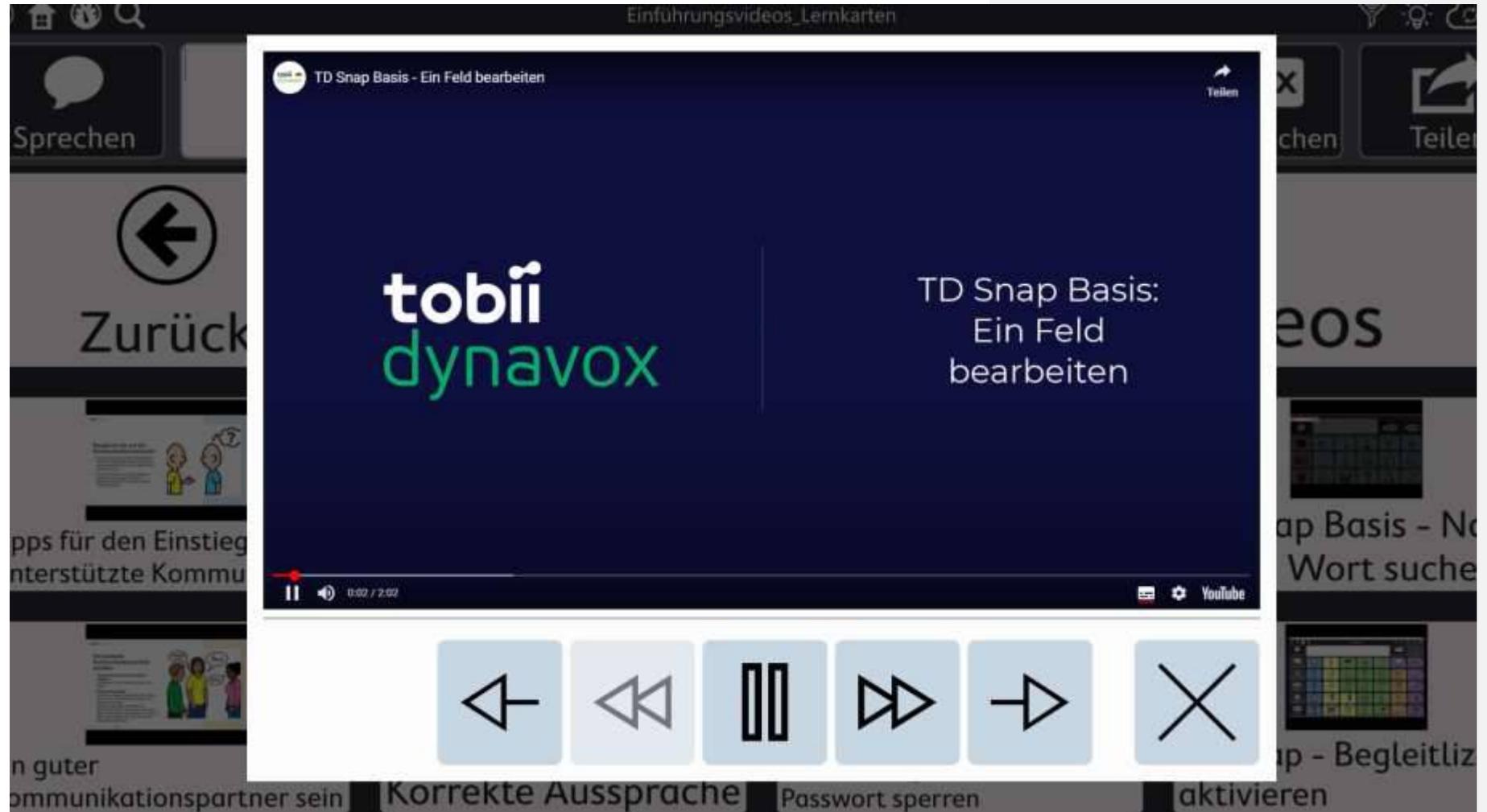



TD Snap 1.35
 - Express Seitenset in
 neuen Sprachen, z.B.
 Arabisch und
 Französisch



Navio



Partnerfenster



Partnerfenster



vergeben



vergeben



vergeben



vergeben



vergeben



vergeben



vergeben



vergeben


TD Snap 1.35 - und natürlich neue PCS Symbole




Energydrink



Fusilli

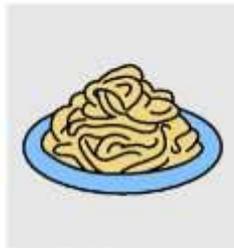

Spaghetti

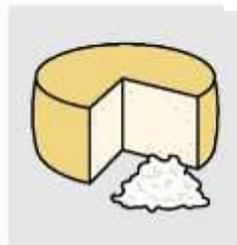

Parmesan



nein, Danke




nein, Danke



nein, Danke



nein, Danke

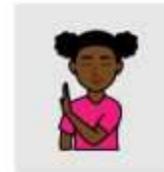

nein, Danke



nein, Danke



nein, Danke



nein, Danke


April 2025

- Update auf Version 1.36





TD Snap 1.36
 - Express Seitenset in
 neuen Sprachen, z.B.
 Italienisch, Polnisch,
 Spanisch, etc.

Express Seitenset in neuen Sprachen, z.B. Italienisch, Polnisch, Spanisch, Deutsch: Lokalisierungen nicht Übersetzungen!

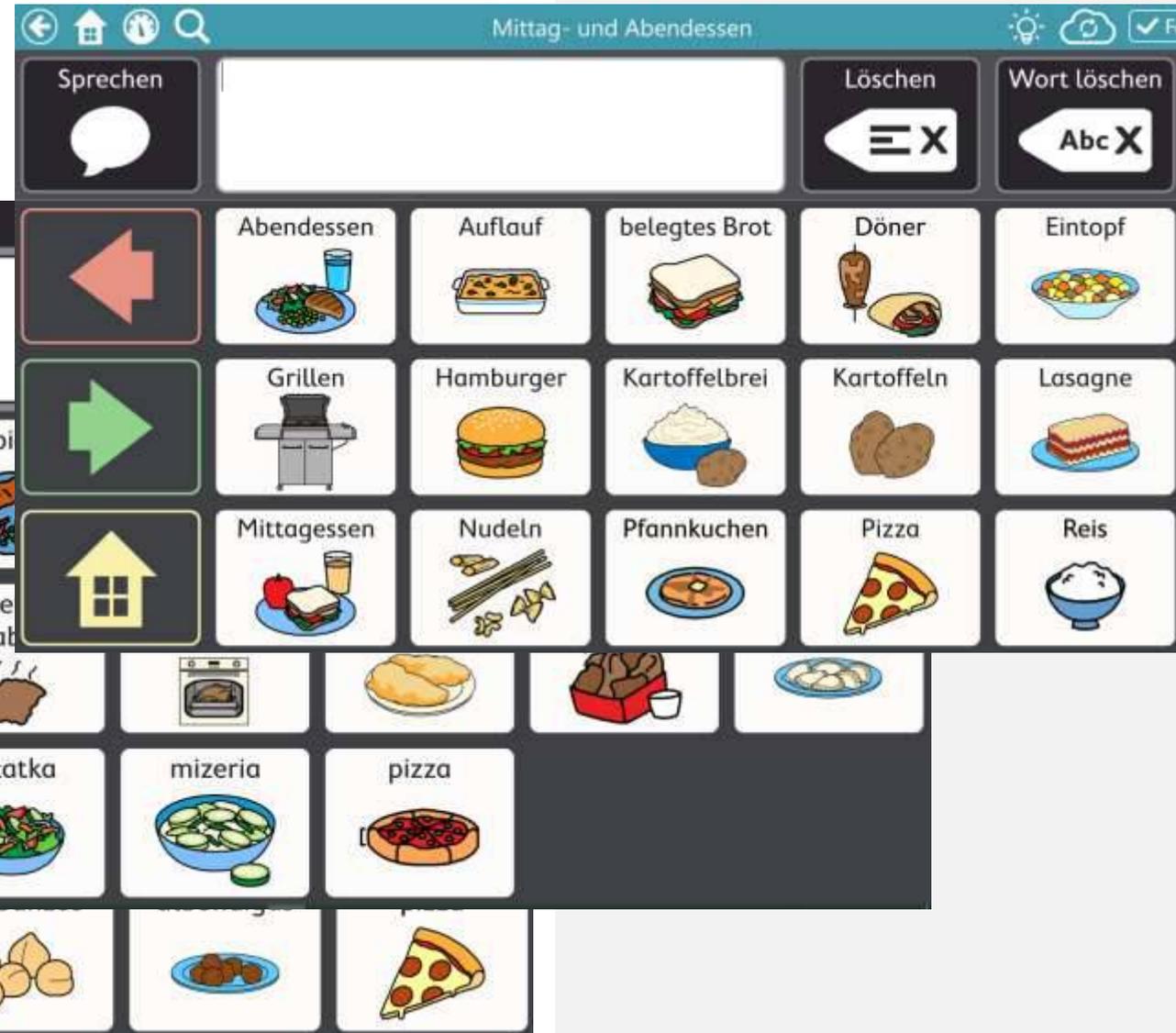

Whiteboard kann nun als .jpeg gespeichert werden.

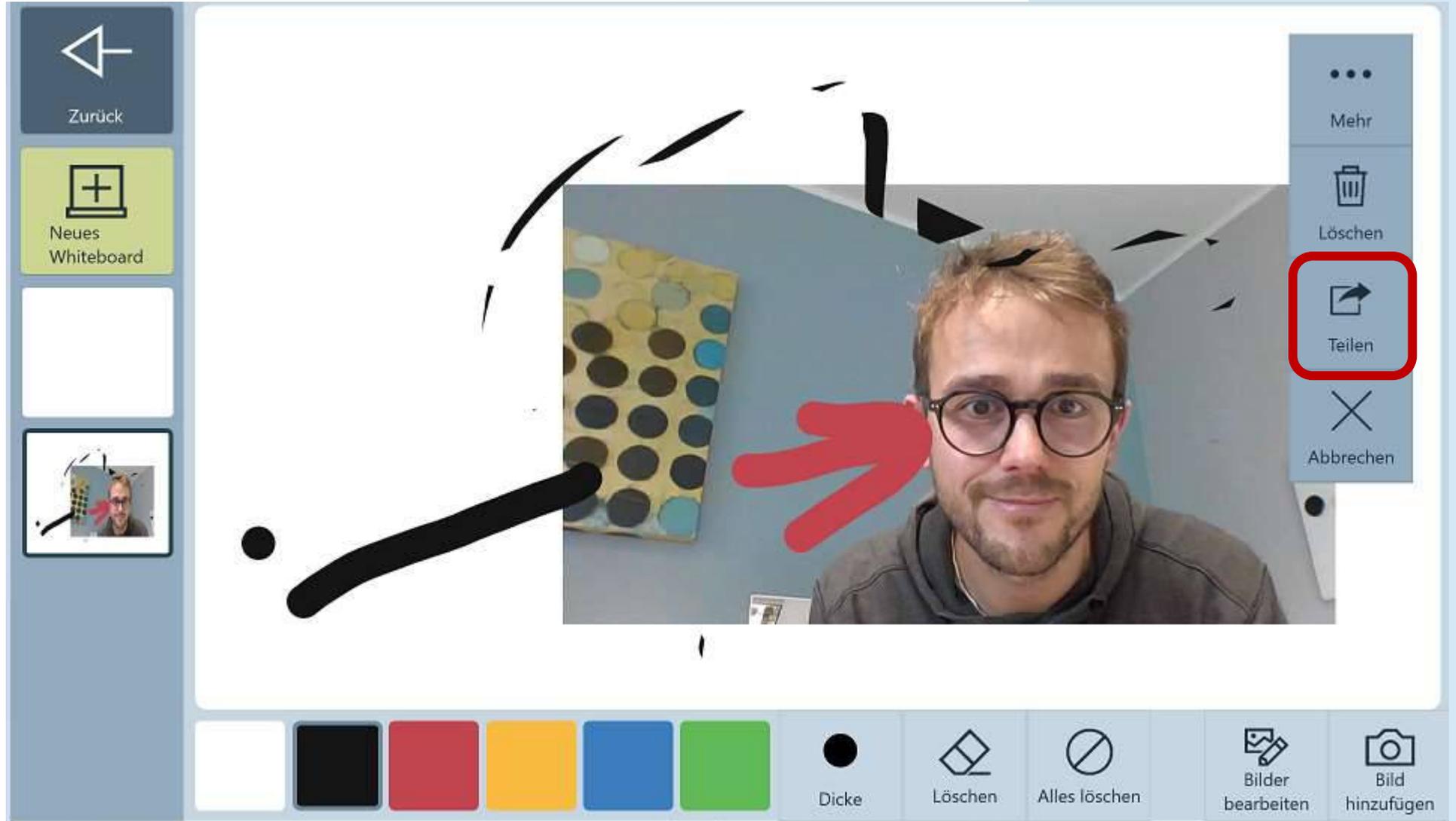

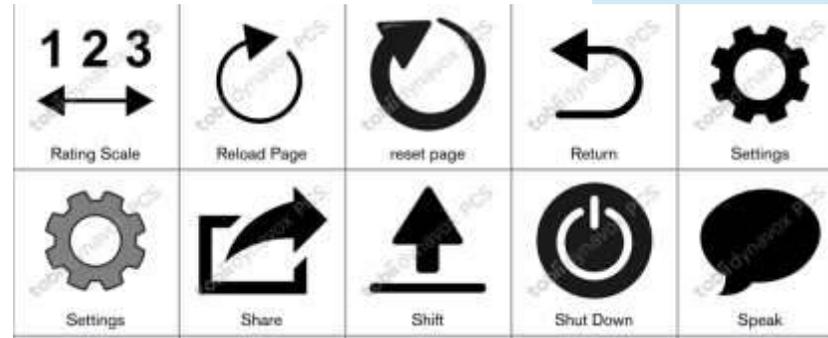

TD Snap 1.36
- und natürlich neue PCS Symbole

tobii
dynavox

Danke!

info.dach@tobiidynavox.com